

健康で快適な生活を提案する

マルタカ



家族のやさしさと
セルウォームDXの温もりが
健康を支えます。

身体の深部からやさしく広がる
超短波治療器の温熱効果。

セルウォームDX



1年間責任保証

医療機器製造販売承認番号:21100BZZ00681A01

すぐにあたたか しっかり温熱実感

いつでもどこでも簡単温熱治療

肩、膝、腰など温めたい部位に、やわらかなパッドをワンタッチ・バンドで固定します。

もちろん、服の上からの簡単装着。

始めは5分から、慣れてきたら10～20分程度と時間も手間もかかりません。

首



肩・手



パッドを離してご使用の場合、レベルが低めに表示されます。

ひざ



関節や肌に直接あたる部位にはパッドカバー、またはタオルをお使いください。

肩



腰



腹・腰



超短波の温熱効果により、
神経痛や筋肉痛の痛みが
やわらぎ、胃腸のはたらきも
活発になります。



目覚めが違う、まるで身体が
軽くなったような一日の始まりを……


セルウォームDX

Point 1

ハイパワー&急速加温

最大出力50ワットのハイパワーで、すぐに温かさが実感できます。治療開始から約60秒間、最大出力で急速加温、その後設定出力に下がります。

ハイパワー&急速加温、高速自動同調

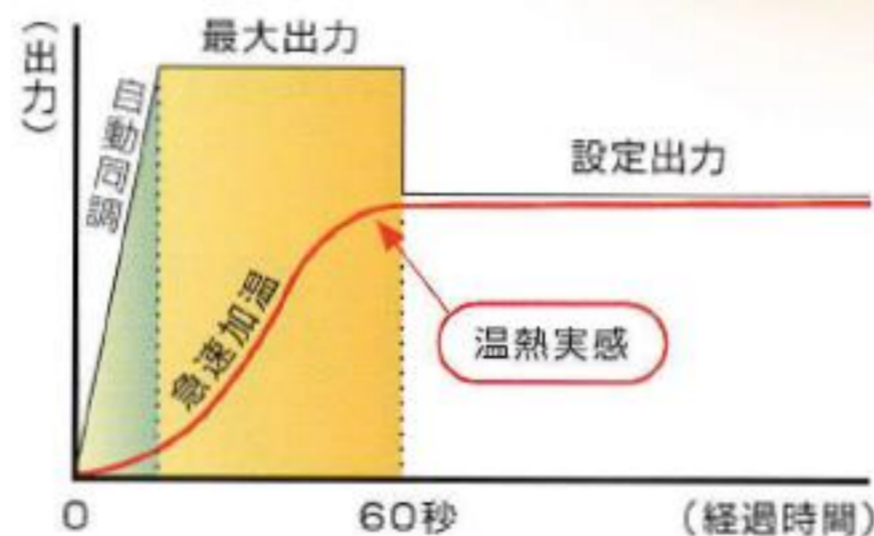

表示パネル



Point 2

高速自動同調

治療部位に合わせた高速自動同調で、わずらわしい調節はいりません。スタートボタンを押すだけで、あとはセルウォームDXにおまかせ。いつでも効率よく治療効果が得られます。

Point 3

室温センサー内蔵

お部屋の温度を室温センサーが感知して、出力を自動的に補正します。季節や着衣が変わっても、温感はずっと安定しています。

超短波とは

セルウォームDXの治療で効果を発揮する超短波は、1秒間に2,712万回の早さで極性が変わる短い波長の電波(周波数27.12MHz)です。この電波が身体の中へ透過するとき、細胞に共振運動を起こし、内臓や筋肉・関節など身体の深部を効率よく温めます。そして毛細血管が拡張し、血行がよくなるのです。

分子の共振運動で、摩擦熱が発生



Point 4

より使いやすく、 安全性を高めた 充実機能

シンプルな流線型のボディとモダンなカラーリング、さらにうれしい省スペース設計。ご高齢の方にも見やすい前面表示パネルと大型ボタンですから、操作が簡単です。安全停止機能、温度過昇防止機能など充実した安全性を実現しました。

Point 5

低ノイズ設計

ノイズを抑え、テレビやコードレスフォンなど他の家庭電化製品への影響を極力減らしました。(当社比)

超短波治療器

手軽にご使用いただける〈家庭用〉超短波治療器セルウォームDXは、超短波が身体の深部まで十分透過して、身体の内側からじっくり、やさしく温めます。この温熱効果により、血液循環を促し、身体の疲れやコリをやわらげます。また、胃腸の働きも活発にします。超短波療法は、病院の整形外科やリハビリ施設で広く使われている理学療法です。



セルウォームDX

ハイパワーで高性能、モダンな小型ボディの超短波治療器

● 使用目的・効能効果

超短波による局所の温熱効果。
一般家庭で使用する。

仕様

●販売名	セルウォームDX
●承認番号	21100BZZ00681A01
●区分	管理医療機器
●類別	機械器具(78) 家庭用電気治療器
●一般名称	家庭用超短波治療器 (JMDNコード 70988000)
●電源電圧	交流100V
●周波数	50/60Hz
●消費電力	135W
●定格時間	30分
●発振周波数	27.12MHz
●質量	約5kg(本体)
●外形寸法	高さ430×巾170×奥行340mm(本体)
●主な機能	自動同調機能、出力調整(8段階)、 急速スタート機能、室温-出力補正機能
●安全装置	タイマー、安全停止機能、 温度過昇防止機能、過電流保護装置

*改良のため、予告なく一部仕様変更することがあります。



足裏にも、どうぞ。



冷える季節には、
靴下をはいた両足を
足裏から温めるのも
効果的です。
(この場合、出力レベルは
下がります。)

オプション付属品



パッドカバー/2枚組み
¥2,000(税込¥2,100)

●電気代: お一人15分、ご家族4人でお使い頂いた場合、
一ヶ月の電気代はわずか80円です。

(概算料金につき、ご使用の地域や条件により異なります。)

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



安全に関する
ご注意

- 次のような機器との併用は誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。
ペースメーカー、植込み型除細動器等の電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器/人工心肺等の生命維持用医用電気機器/心電計等の装着型の医用電気機器/他の治療器や電気製品
- 次のようなところへの使用は避けてください。症状が悪くなったり、やけどの原因になります。
内出血を含む出血部位/月経時の腹部/頸部/男性生殖器/体内に金属やプラスチックなどを埋め込んであるところ
- 次のような場合もしくは身体に異常のある方は医師に相談された上、その指示に従ってください。
心臓に障害のある方/脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性とう(疼)痛性疾患の方/悪性腫瘍のある方/体温38℃以上(有熱期)の方/妊娠初期の不安定期、または出産直後の方/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方/血圧に異常がある方/安静を必要とする方/血管障害のある方/体語のすぐれない方
- 金属性のもの(貴金属、装身具、金属糸・導電性繊維入りの服等)は、取り外してください。
- 使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 本品に万一故障など発生の場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。